



# TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy

## Návod na používanie

### OBSAH:


- I. Úvod o produkte
- II. Zloženie produktu
- III. Účinky
- IV. Indikácie
- V. Kontraindikácie
- VI. Používanie
- VII. Upozornenie
- VIII. Údržba
- IX. Riešenie problémov

### I. Úvod o produkte

Inteligentný systém riadenia jediným čipom slúži na dosiahnutie integrovaného výrobku na vyrovnanie krvného tlaku, laserovú terapiu a masáž.

Vďaka prečesávaniu vlasov dochádza k harmonizácii rozdielov elektrického potenciálu ľudskej hlavy, upraveniu abnormálneho elektrického potenciálu na normálny a vyrovnaníu krvného tlaku; zároveň používanie lasera zlepšuje mikrocirkuláciu srdca a mozgu, podporuje prúdenia krvi v hlave; vibračná masáž prináša ľuďom komfort a úľavu pri mozgovom napätí upravením rozdielu elektrického potenciálu hlavy.

## II. Zloženie produktu

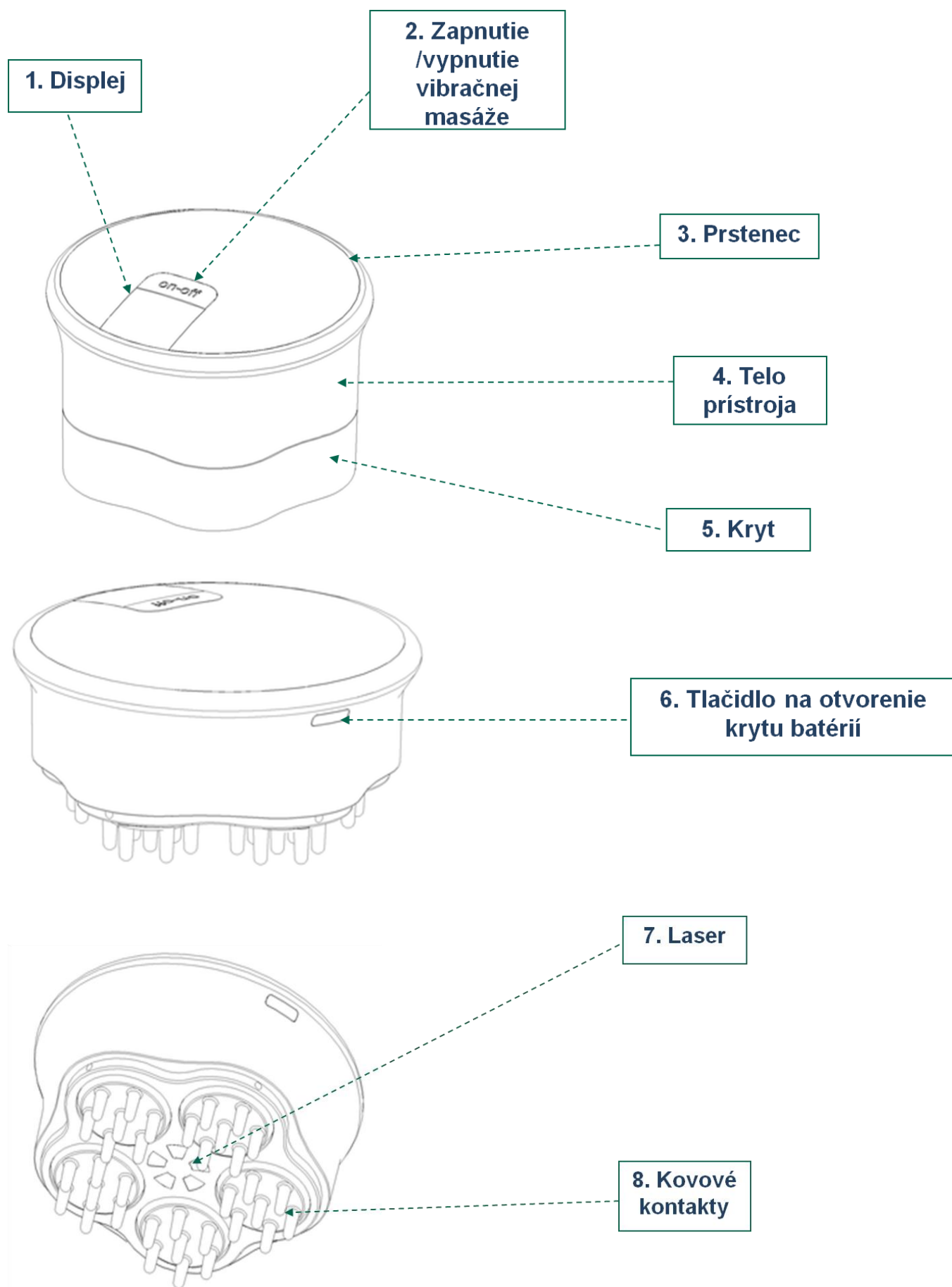

### III. Účinky

Vyrovňavanie krvného tlaku, laserová terapia a vibračná masáž – všetko v jednom.

### IV. Indikácie

Je vhodný pre ľudí, ktorí si potrebujú vyrovnať krvný tlak; žijú pod veľkým pracovným tlakom, psychickým stresom, prepracovanosťou; pre ľudí trpiacich bolesťami hlavy alebo závratmi spôsobenými elektromagnetickým žiarením, ľudí s nalomeným zdravím; ľudí, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť.

### V. Kontraindikácie

Nie je vhodný pre ľudí, ktorí majú v tele kovové implantáty, ako je kardiostimulátor a pod.; pre tehotné ženy, pacientov s duševnými poruchami, so zlyhaním obličiek a pre ľudí alergických na tento výrobok.

### VI. Používanie

1. Zatlačením otvorte kryt batérie ⑥, správne vložte dve 1.5V (7#) batérie a uzatvorte kryt, a následne otvorte spodný kryt.
2. Pevne chyťte kovový prstenec ③ a pritlačte kovový kontakt ⑧ tesne k hlave alebo telu; vytvorí sa obvod medzi vodivým prstencom a kovovým tlačidlom a následne sa LCD displej a laser rozsvietia. Pravidelné prečesávanie vyrovnáva elektromotorickú silu tela a vyrovnáva krvný tlak.
3. Zapnite vibráciu stlačením tlačidla vibrácie ON/OFF ② na 2 sekundy, s predvolenou slabou úrovňou; krátkym stlačením tlačidla prepnete silnejšiu úroveň a naopak; zvolte si vhodnú úroveň podľa postupu vyššie, pritlačte kovový kontakt ⑧ na hlavu alebo telo na uvoľnenie mozgového napätia, potom prístroj vypnite stlačením ON/OFF na 2 sekundy.
4. Obvod prerušíte zatvorením krytu.

Postupujte podľa tohto Návodu na používanie.



### VII. Upozornenie

1. Pri používaní presne dodržiavajte tento Návod na používanie.
2. Pred vložením batérií neotvárajte spodný kryt.
3. Nemierajte laserovým lúčom priamo do očí po dlhšiu dobu.
4. Prístroj nepoužívajte vo vlhkom alebo horúcom prostredí.
5. Chráňte prístroj pred priamym slnečným svetlom a koróziou plynmi.
6. Ide o prístroj určený na použitie v domácnosti, preto nie je vhodný na komerčné a iné použitie.
7. Nevkladajte do prístroja cudzorodé objekty.
8. Ak počas používania zaznamenáte akúkoľvek nepohodu alebo abnormálne pocity, prestaňte ho používať a okamžite kontaktujte personál autorizovaného servisu.
8. Ak sú časti tela, ktoré chcete masírovať, liečené inou terapiou, použitie prístroja konzultujte s lekárom.
9. Ľudia s kožnými alergiami by mali použitie prístroja vopred konzultovať s lekárom.

## VIII. Údržba

1. Po použití nezabudnite vyčistiť telo prístroja suchou jemnou tkaninou alebo tampónom alebo utrite masážnu hlavicu medicínskym alkoholom kvôli dezinfekcii.
2. Nenamáčajte do tekutiny, aby ste nepoškodili elektrický obvod.
3. Chráňte ho pred vlhkom a chemickou kontamináciou, skladujte na suchom mieste s nízkou vlhkosťou.
4. V prípade nevyriešených problémov kontaktujte odborníkov, nepokúšajte sa prístroj rozoberať.
5. Zabráňte silným nárazom, kolíziám, pádom, hádzaniu, atď., aby ste sa vyhli poškodeniu prístroja.
6. Vyhňte sa ponoreniu do vody, styku s lúhom, nepoužívajte ho počas umývania vlasov a v sprche.

## IX. Riešenie problémov

Chyba	Dôvod	Riešenie
Nedá sa zapnúť	Vybité batérie (alebo slabý kontakt)	Vymeňte batérie
Nevibruje	Ak dlho držíte on-off	Stlačte on-off na 2 sekundy
Nedá sa vypnúť	Ak dlho držíte on-off	Stlačte on-off na 2 sekundy
Nesvieti laserový lúč	Nedotýkate sa rukou kovového prstenca	Chyťte rukou kovový prstenec
Nesvieti laserový lúč	Vybité batérie (alebo slabý kontakt)	Vymeňte batérie

### Špecifikácie produktu

Názov: TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy

Typ : TQ-ZO6

Výkon: 3,5 W

Čistá hmotnosť: 165 g

Celková hmotnosť: 505 g

Výkonný štandard: Q/12WQ 5111

Rozmer hlavného tela produktu: 90,5 mm x 90,5 mm x 53,5 mm